



## CON AGHI



Headpiece bracket




10.4Inch TFT Screen



Key&Emergency Button

System Type	Bipolar RF (Radio Frequency)
Screen Size	10.4" inch TFT Color Touch Screen
<b>Frequency</b>	<b>2 MHZ</b>
Three Operation Mode	Micro Needle Fractional RF (MFR) Superficial Fractional RF (SFR) Cold & Heat Hammer
Total RF treatment Level	Up to Level 10
Treatment Duration time	1000-3000ms adjustable
Disposable Tip	MFR tips: 25/49/81Pin SFR Tip: 24pin
Depth of Needle	0.25-3mm adjustable
Spot Size	12x12mm
Diode Laser Indicator	650nm, 50mW
Cooling Liquid	Pure water or Distiller Water
Voltage	AC 110V/220V, 60Hz/50Hz
Net Weight	25KG
Dimension	42x38x130cm

➔ **01.Features**

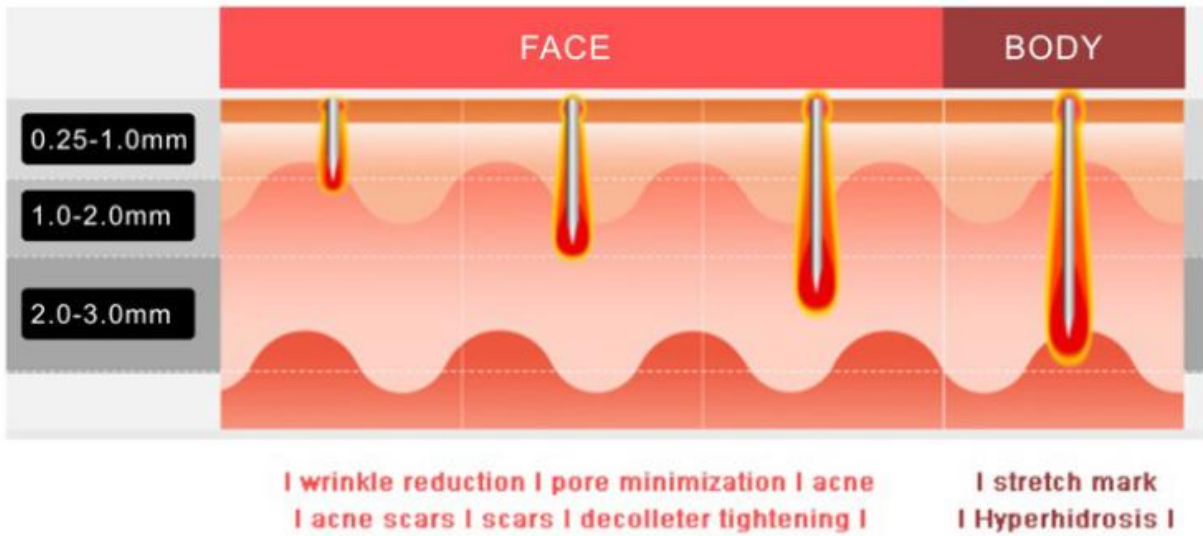

☀ **SFR&MFR Headpiece display** ☀



Micro Needle Fractional SFR&MFR Headpiece with Gold Needles, it can equip followed 4 types treatment tips.



Invasive and Non-Invasive function combined technology!



**Cold&Heat Hammer Headpiece**



**SFR 25 Pin Tip**



**SFR 49 Pin Tip**



**SFR 81 Pin Tip**



**MFR 25 Pin Tip**

# 10MHZ SENZA AGHI




Energy Density (Fluence)	1-50J/cm <sup>2</sup>
System Type	CPT Fractional RF machine
Cooling Type	Water+ Semi-Conductor+ Fans Cooling
Fractional RF Frequency	10Mhz
Fractional RF head tips	Small, Medium, Big tip for eyes face and Body treat
Cooling Liquid	Pure Water or Distilled Water
Screen Position	Screen can be folded with different angle
Display	10.4" True Color LCD Touch Screen
Electrical Requirements	100-240VAC, 20A max., 50/60Hz
Net Weight	35 kgs
Dimensions (WxDxH)	63*53*118cm



## Application



- Skin Rejuvenation
- Vascular Removal
- Pigmentation removal
- Skin Tighten
- Wrinkle Removal
- Stretch Marks Removal
- etc.....

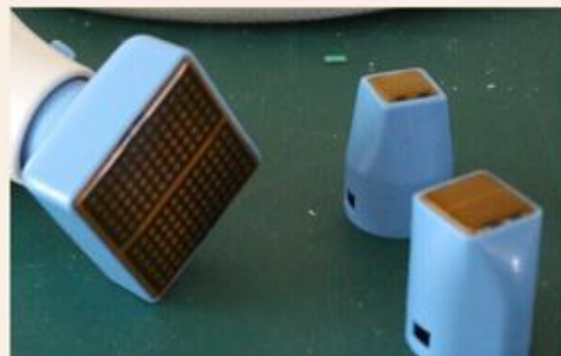

## Features:

- 1.RF Resurfacing Technology:Heating,Necrosis,Ablation;
- 2.Patient Customized Treatment Program;
- 3.Absolute Treatment effect for Wrinkle,Scar,Pore Less side effects:No pigmentation at a high RF energy level;
- 4.Treatable various indicants;
- 5.it can apply to different colors of skin;

## Advantages:

1. User-friendly software design: simple parameters setting and easy operation,
2. Professional design headpiece from U.S.A
3. 3 different function headpieces for different treatment requirement
4. 100% American/Germany imported "plug and play" handle connections: translate into reliable and long lasting machines capable of continuous work in busy clinics/salons
5. Alarm protection system of water flow and water temperature: stop all working immediately in case of any risk, protecting people & machine against any risk at the first time
6. Painless™Low complication risk, minimum downtime and no side effects.
7. Automatic water cooling system promise treatment more safe and comfortable.



## Advantages:

### Around the eyes

- Under eye bags
- Hooding
- Rough texture on the eyelids
- Wrinkles and fine lines



### On the face

- Sagging skin
- Loose jowls
- Lack of definition in the jawline
- Sagging neck skin
- Wrinkles and fine lines
- Lack of definition in the lips



### On the body

- Sagging or bulging skin
- Loose Skin
- The appearance of cellulite



## Specifications

Energy Density (Fluence)	1-50J/cm <sup>2</sup>
System Type	CPT Fractional RF machine
Cooling Type	Water + Semi-Conductor + Fans Cooling
Fractional RF Frequency	10Mhz
Fractional RF head tips	Small, Medium, Big tip for eyes face and Body treat
Cooling Liquid	Pure Water or Distilled Water
Screen Position	Screen can be folded with different angle
Display	10.4" True Color LCD Touch Screen
Electrical Requirements	100-240VAC, 20A max., 50/60Hz
Net Weight	35 kgs
Dimensions (WxDxH)	63*53*118cm



Con la **radiofrequenza frazionata** possiamo agire in modo efficace e delicato sull'aspetto della pelle del viso che è fondamentale: un viso ben proporzionato, uno sguardo giovanile, non possono convivere con una pelle spenta e rugosa.

Se le rughe più marcate possono essere trattate con la **tossina botulinica** e l'**acido ialuronico**, non sempre questi trattamenti si dimostrano efficaci nel risolvere le fini rughette che compaiono intorno alla bocca e sulla palpebra inferiore.

Per raggiungere tale obiettivo, il trattamento più appropriato è il **resurfacing del viso**, solitamente ottenuto attraverso dei laser. La luce laser, purtroppo, è gravata da numerosi effetti collaterali, è controindicata durante il periodo estivo e può aggravare o creare delle zone più scure della pelle (macchie).

La **radiofrequenza frazionata** è il più moderno trattamento non invasivo del volto, per eliminare le microrugosità della pelle e restituirle un aspetto più giovanile.

Consiste nell'applicazione di un manipolo sulla pelle che riscaldandola asporta gli strati superficiali della pelle in microcolonne.

La sensazione provocata dal passaggio del manipolo è di un lieve pizzicore, che svanisce rapidamente nel giro di qualche ora. Possono formarsi delle piccole crosticine per circa 48 ore, ed è importante evitare qualunque tipo di esposizione al sole.

La pelle che si ricostituisce a partire dalle zone non colpite risulta ringiovanite, più elastica, tonica e luminosa. Le fini rugosità della palpebra inferiore e delle labbra si attenuano fino a scomparire.

E' solitamente efficace anche un solo trattamento, ed è sempre possibile ripeterlo per mantenere nel tempo il risultato ottenuto.



# VERSIONE PORTATILE CON AGHI



## Specification

NEEDLE DEPTH	0.5mm, 1mm, 1.5mm
RF CONDUCT. TIME	0.1s ~ 2s (0.1s unit)
RF OUTPUT	1w-50w(1w unit)
RF E. FIELD WIDTH(at 1mm Depth)	55mm <sup>2</sup>
RF FREQUENCY	Bipolar ,2MHz
ELECTRODE NO.	36pin
SPOT SIZE	1cm <sup>2</sup>
Work mode	CW mode, Pulse mode
Working program	3 max program